



达士智能人体秤

eS-668B4

使用说明书



微信互联™

销售商
 深圳市达士科技股份有限公司
 地址: 深圳市南山区西丽镇塘朗村同富裕工业城8栋3楼
 传真: 0755-26068176
 前台座机: 0755-26068758
 邮编: 518055
 网址: www.anyk.com.cn


制造商
 东莞市森普实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇科苑城沙新路192号
 TEL: 0769-89893000
 FAX: 0769-89899380

服务热线 **400-0022-058**


本产品采用电子LCD显示并配合高精度传感器测量重量,重量值通过蓝牙BLE传输给手机的微信客户端,在微信客户端做健康监测和健康管理。使用钢化玻璃做秤面设计,产品安全,美观大方,适合家庭测量人体重量使用。为了正确使用本产品,以确保称重准确性及使用寿命,请在使用前仔细阅读本说明书。

使用方法

- 第一次使用时,打开智能人体秤底部的电池盖,按照电池仓标识正确装入4节7号(AAA)电池,并盖合好电池盖;
- 打开您的手机微信,点击“扫一扫”,将手机对准智能人体秤底部的二维码,扫一扫,进入“天天健康倍泰”公众号,点击“绑定设备”后再点击“进入公众号”按钮。(请确保您手机蓝牙已打开,如蓝牙关闭,请按手机操作方法打开蓝牙);
- 将智能人体秤放在硬实平稳的地板上,单脚踏于秤面,待显示屏幕点亮后,单脚即可离开。待屏幕显示0.00公斤后,人体站到秤面上,保持身体直立平稳,秤屏幕显示您的当前体重值;

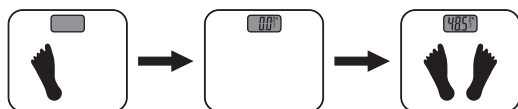

- 以后再次使用时,打开手机微信,进入“天天健康倍泰”公众号,人体直接站于秤面,即可称重;

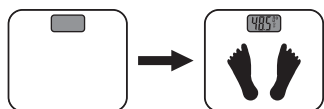

- 手机微信“天天健康倍泰”公众号界面上即会推送当前您测量的体重值;(亲,记得开启蓝牙,否则手机无法显示数值。)

- 在手机微信上对您的健康值进行操作,详见“天天健康倍泰”公众号里面的说明。

使用功能

- 初次上电: LCD全显后归零,显示0.00公斤,即可上秤称重;
- 称重模式: 待机或者归零状态下,人体上秤,测量人体重量,当重量锁定后,发送锁定重量给蓝牙,此时显示数据为有效读数,可连续称重;
- 超载显示: 当称重重量大于额定量程,显示“oL”,约2秒后自动关机;
- 自动关机:
 - 归零状态下,无任何操作约15秒钟左右自动关机;
 - 当称重稳定后,人下秤,无任何操作约15秒钟左右自动关机;
- 数据传输: 打开手机蓝牙,用微信扫描产品底部的二维码,关注公众号“天天健康倍泰”,产品开机,微信将自动连接绑定设备,实现微信公众号与设备互联互通。

技术规格

- 产品尺寸: 280x240x27mm;
- 大屏幕LCD显示: 75x35mm
- 背光: 白色背光;
- 开机方式: 重量开机;
- 最小开机重量: 5公斤;
- 额定量程: 3公斤-150公斤;
- 分度值: 1D=0.05公斤;
- 低电侦测: 当电池电量低时,开机显示“Lo”后关机;
- 超载提示: 当称重超过153公斤时,显示“oL”;
- 电源电压: DC 6V, 电池AAA*4;
- 蓝牙规格: BLE, 串口双向通信;
- 蓝牙连接指示: 当设备连接上微信公众号后,微信公众号左上角会出现“已连接1个设备”字样;备注: 通过蓝牙与手机的微信连接(手机蓝牙需要开启哦! 否则无法与设备连接。)
- 最佳工作温度: 10—40℃;
- 存储温度: -10℃—+50℃;
- 湿度要求: ≤90% RH。

产品保修卡

感谢购买本产品,为保障您的权益,请在购买后仔细阅读以下内容:

保修服务内容

- 本产品免费保修期为1年(自购买凭证填报日期起计算)。在有效保修期内,凡属于产品本身质量引起的故障,可凭购买凭证和产品保修卡联系经销商进行免费维修。
- 请妥善保管购买凭证和产品保修卡作为保修凭证;如您不能出示以上证明或购买凭证一经涂改,保修自行失效。
- 下列情况不属于免费维修范围,我公司可提供有偿服务。

敬请注意:

1. 未按使用说明要求使用、维护、保管导致的产品故障或损坏。
2. 超出保修期限。
3. 无保修卡及有效购买凭证的。
4. 未经本公司许可,擅自改动本身固有的零件或擅自拆机修理。
5. 意外因素或人为行为导致产品损坏,如进水、机械破坏、损坏等。
6. 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
7. 保修卡内容的最终解释权、修改权归深圳市达士科技股份有限公司所有。

用户存根 为了维护您的权益,请您认真填写,并妥善保管,作为维修时的凭证。		
产品销售信息	产品型号:	联系电话:
	产品名称:	销售日期:
用户信息	用户姓名:	联系电话:
	通讯地址:	
	电子邮箱:	

销售商: 深圳市达士科技股份有限公司
 地址: 深圳市南山区西丽镇塘朗村同富裕工业城8栋3楼
 售后服务热线: 400-0022-058 传真: 0755-26068176
 前台座机: 0755-26068758 邮编: 518055

制造商: 东莞市森普实业有限公司
 地址: 东莞市塘厦镇科苑城沙新路192号
 TEL: 0769-89893000 FAX: 0769-89899380

注意事项

- 本智能人体秤设备目前仅支持6.2以上的微信版本,若微信版本低于6.2则无法与智能人体秤进行正常绑定连接。
- 本智能人体秤设备采用蓝牙4.0,仅支持蓝牙4.0、安卓4.3以上系统的手机,若手机系统低于蓝牙4.0,则无法与智能人体秤正常连接。
- 本智能人体秤玻璃面应保持干燥,避免沾水以防称重时滑倒。
- 正常称重时本产品仅受静压力。为非正常使用并受到撞击、打击、冲击或跌落时,很容易损坏秤并且会使玻璃破碎造成危险。
- 不可使用化学溶剂擦秤体,必要时可用湿布清洁本秤,清洁时注意不要将水流进秤的内部,不要将秤浸在水中,以免损坏内部的电子元器件。
- 为确保秤的使用寿命,请不要将秤放置在过度湿热的环境中。
- 秤宜水平放置,不宜竖直放置。
- 长期不用时,请将电池取出。
- 如果秤在开机时无法显示,请检查电池与触点是否接触不良,若秤已用久,可确认是否需要更换电池再试,必要时请与当地经销商联系或致电本公司。
- 本智能人体秤只可作家庭称人体体重使用,不可做商业或其他用途。
- 在使用中请保持秤放在水平面且坚硬的地方,不要使本秤工作在突然变化的温度环境中,称重的最大重量不要超过额定量程的150%,以免损坏测力部件。



合格证

产品名称: 达士智能人体秤

产品型号: eS-668B4

出厂日期:

检验员:

belter
QC Pass

东莞市森普实业有限公司